

Manualna instrukcja do:

Male Edge Basic, Male Edge Extra i Male Edge Pro


1



ZACZYNAAMY


Male Edge jest dostarczany w całości (złożony).

2

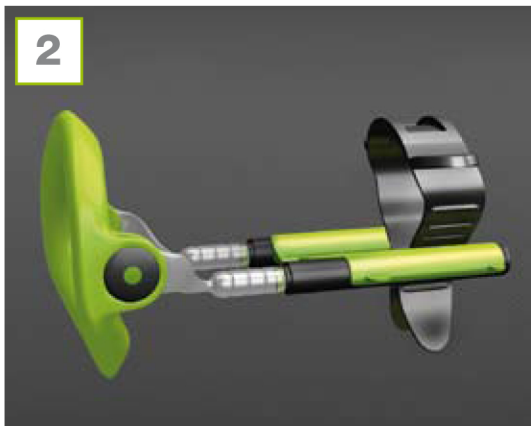


USTAWIANIE PRZEDNIEJ CZĘŚCI

Jeżeli długość Twojego rozciągniętego penisa w stanie spoczynku ma więcej niż 12,5cm, powinieneś obrócić przednią część/gumowy pasek w ten oto sposób. Jeżeli długość Twojego penisa ma mniej niż 12,5cm, przednia część może pozostać w pierwotnym miejscu.

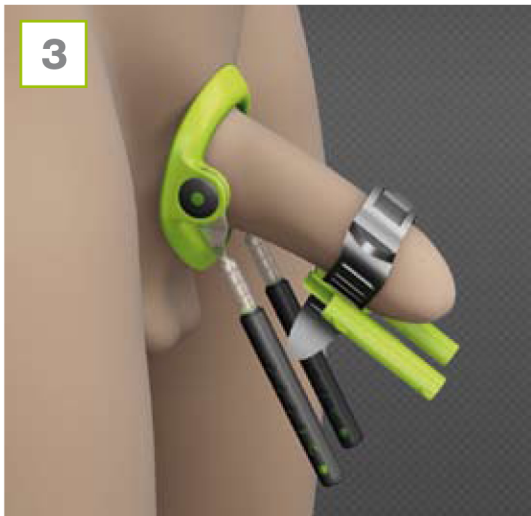3


PIERŚCIEŃ NASADOWY

Oddziel przednią część od prętów. Nałóż ostrożnie pierścień na podstawę swojego penisa i pozostaw go tam.

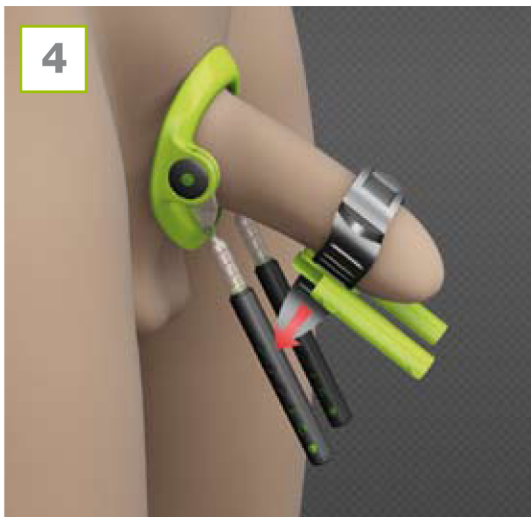4


ZAKŁADANIE GUMOWEGO PASKA

Umieść pasek za żołądźką i zacisnij go. Jeżeli jesteś nieobrzezany, możesz nosić pasek na końcu napletka lub pod, tak jak będzie Ci wygodniej.

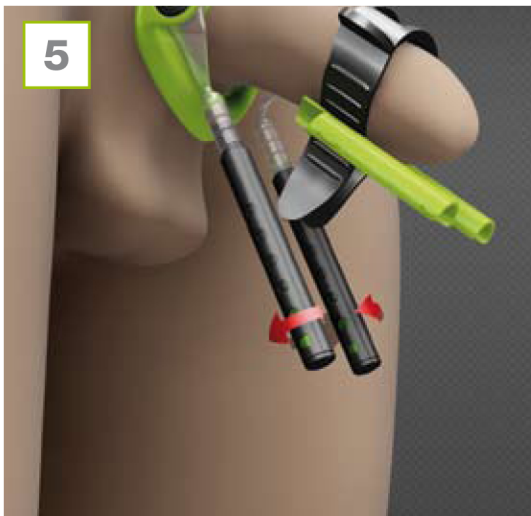5

DOPASOWYWANIE DŁU- GOŚCI PRĘTÓW


Obróć pręty zgodnie z ruchem wskazówek zegara o ćwierć obrotu i wysuń je na zewnątrz aż do uzyskania odpowiedniej długości.

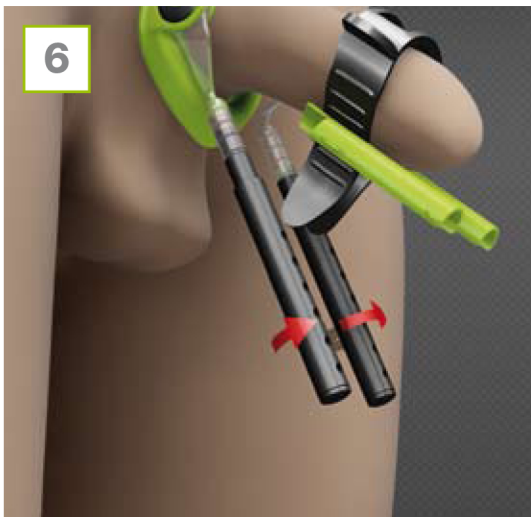6

USTAWIANIE DŁUGOŚCI PRĘTÓW

Kiedy długość prętów jest już dopasowana, obróć je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż usłyszysz "podwójne kliknięcie".

7

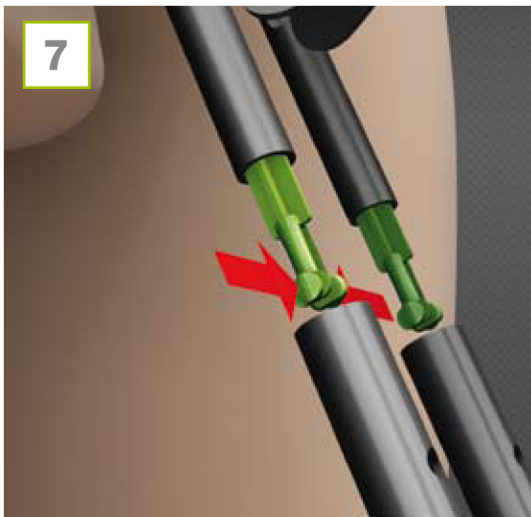

NIE WYSUWAJ PRĘTÓW ZA DALEKO


Upewnij się, że boczne pręty są wysunięte maksymalnie na długość ostatniej pary dziurek. Jeżeli pręty wypadają i odczepiają się, wystarczy ścisnąć podwójne wypustki i z powrotem wsunąć pręty w ten oto sposób.

8




PRZYMOCOWYWANIE PRZEDNIEJ CZĘŚCI DO PRĘTÓW

Kiedy pręty są ustawione na odpowiednią dla Ciebie długość, przesunij je z powrotem delikatnie w kierunku Twojego ciała. Musisz teraz przymocować przednią część do prętów wydłużających popychając i dociskając je do siebie. Następnie poczekaj aż usłyszysz kliknięcie, które będzie oznaczało, że przednia część jest dobrze zamocowana.

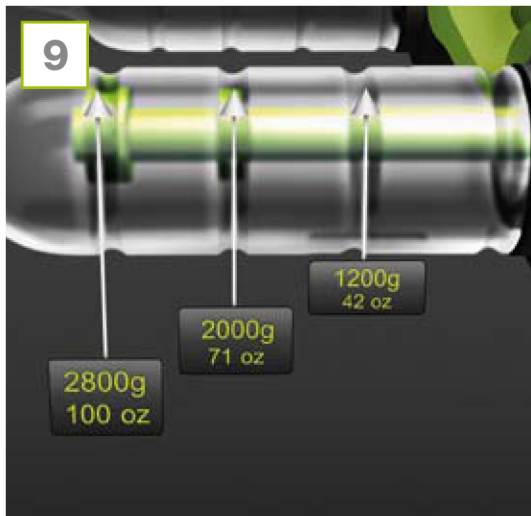

SPRAWDZANIE TRAKCJI

Sprawdź jaka jest trakcja ustawiając równo wewnętrzny pręt ze wskaźnikami na przezroczystym cylindrze, który znajduje się tuż nad pierścieniem nasadowym.

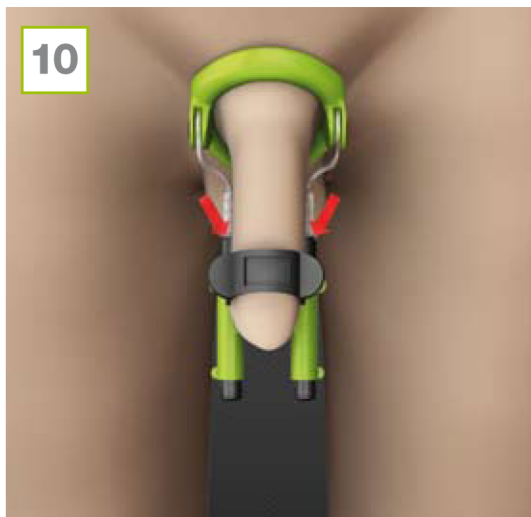

ZWIĘKSZANIE TRAKCJI

Za pomocą kciuków przesunij delikatnie do przodu pręty wydłużające o jedno kliknięcie. Pamiętaj, aby nie wyjść za ostatnią dziurkę znajdującą się na prętach wydłużających.

11 HARMONOGRAM NOSZENIA MALE EDGE

TYDZIEŃ	TRAKCJA	GODZIN DZIENNE
1	8-1200g / 28-42oz	1
2	8-1200g / 28-42oz	2
3	1200g / 42oz	3
4	1200g / 42oz	4
5	1200-2000g / 42-71oz	5
6	1200-2000g / 42-71oz	6

12 NOSZENIE I DBANIE O MALE EDGE

Dzięki temu, że urządzenie Male Edge jest elastyczne może ruszać się w górę lub w dół wybierając najwygodniejsze dla Ciebie ułożenie. Jeżeli chcesz nosić Male Edge w ciągu dnia, możesz zakładać je pod luźne bokserki i spodnie. Możesz również zakładać Male Edge na noc, ale wówczas jego działanie będzie uzależnione od Twoich przyzwyczajeń, ponieważ niektórzy mężczyźni zmieniają pozycje do spania, a inni leżą spokojnie.

Male Edge to produkt wysokiej jakości, ale dbanie o niego nie wymaga zbyt wiele czasu i wysiłku. Zarówno Male Edge jak i gumowy pasek mogą być łatwo i bezpiecznie myte w zmywarce do naczyń. Upewnij się tylko czy przednia część i pręty wydłużające są oddzielone podczas mycia.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: zamowienia@intymnosc.pl; lub zadzwoń **512109807**